



PREVENTION DES BRULURES EN IRM

CONSEILS DE SECURITE

VERIFIER QUE LE PATIENT N'EST PAS PORTEUR D'IMPLANTS, DE DISPOSITIFS, SUPPORTS MEDICAUX ET / OU D'AUTRES OBJETS METALLIQUES. TOUT OBJET INCONNU DOIT ETRE CONSIDERE COMME MR UNSAFE (IRM NON COMPATIBLE).




ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES OBJETS OU DISPOSITIFS MEDICAUX QUI ENTRENT DANS LA SALLE IRM SONT MR CONDITIONAL (IRM COMPATIBLE SOUS CONDITIONS) OU MR SAFE (IRM COMPATIBLE). S'IL EXISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX MR CONDITIONAL, LES CONDITIONS DE REALISATION DE L'IRM DOIVENT ETRE RESPECTEES SUIVANT LA NOTICE D'UTILISATION DU DISPOSITIF. TOUS LES METAUX, MEME NON FERROMAGNETIQUES, SONT SUSCEPTIBLES DE CHAUFFER ET CAUSER DES BRULURES.

LORSQUE CELA EST POSSIBLE, DEMANDEZ AU PATIENT DE SE DEVESTIT ET DE METTRE UNE BLOUSE D'EXAMEN.



POSITIONNER LE PATIENT DE MANIERE A EVITER TOUT CONTACT DE LA PEAU AVEC LA PEAU (PAR EXEMPLE, D'EVITER LE CONTACT DE LA MAIN AVEC LES HANCHES, LES BRAS ET / OU LES JAMBES CROISES, ETC.).

TOUJOURS UTILISER LA PROTECTION REMBOURREE FOURNIE PAR LE FABRICANT D'IRM POUR ISOLER LE PATIENT. VOUS POUVEZ UTILISER DES DRAPS ET DES COUVERTURES POUR AMELIORER LE CONFORT, MAIS ILS NE SONT PAS UN SUBSTITUT A UNE TELLE PROTECTION.

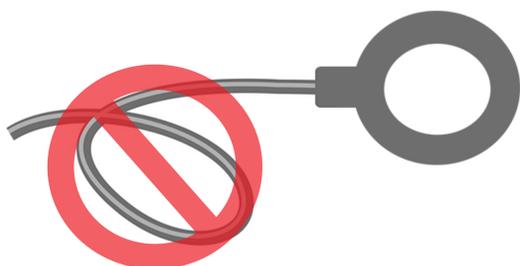

POSITIONNER TOUS CABLES EN LIGNE DROITE. NE PAS ENROULER LES CABLES ET EVITER TOUT CONTACT AVEC LE PATIENT.

A CHAQUE FOIS QUE POSSIBLE, UTILISER UNIQUEMENT LE PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'APPAREIL. MAINTENIR LA SAR AUSSI BAS QUE POSSIBLE.

**SAR
AUSSI BAS
QUE POSSIBLE**



MAINTENIR LE PATIENT SOUS SURVEILLANCE VISUELLE ET AUDITIVE TOUT AU LONG DE L'EXAMEN RESTER A L'ECOUTE DU PATIENT AFIN D'IDENTIFIER RAPIDEMENT TOUS DES SIGNES DE BRULURES. LES PATIENTS SOUS SEDATION DOIVENT ETRE SURVEILLER AVEC DES MONITEURS QUI SONT IRM COMPATIBLES.



SMRT



Traduction n'a pas été fait par la FDA